

Painéis Suspensos JG Moriya

Linha Delta

Unidade de trabalho com suporte para monitores e acessórios, rede de gases e eletricidade



Modelo ERGO


Os Painéis J. G. Moriya são concebidos e fabricados de acordo com a necessidade e solicitação do cliente, um conceito inovador no mercado nacional e utiliza os mesmos conceitos internacionais de qualidade e tecnologia dos outros equipamentos de nossa linha de fabricação. As caixas podem ser confeccionadas em chapas de aço carbono, alumínio, aço inox ou perfil de alumínio. A disposição e quantidade dos pontos de gases, tomadas elétricas, suportes de soro são definidas pelo cliente; e toda essa vantagem está associada ainda ao cumprimento das normas ABNT.



Os painéis Linha Delta têm como função direcionar a alimentação elétrica e de gases próximo aos equipamentos que estarão sendo utilizados dentro de uma unidade de terapia intensiva, tais como ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, etc. A forma construtiva do produto permite melhor distribuição destes equipamentos, além de permitir ao usuário mobilidade, ergonomia, facilidade no manuseio e conseqüentemente agilidade nos procedimentos.



Projeto conforme a necessidade do cliente

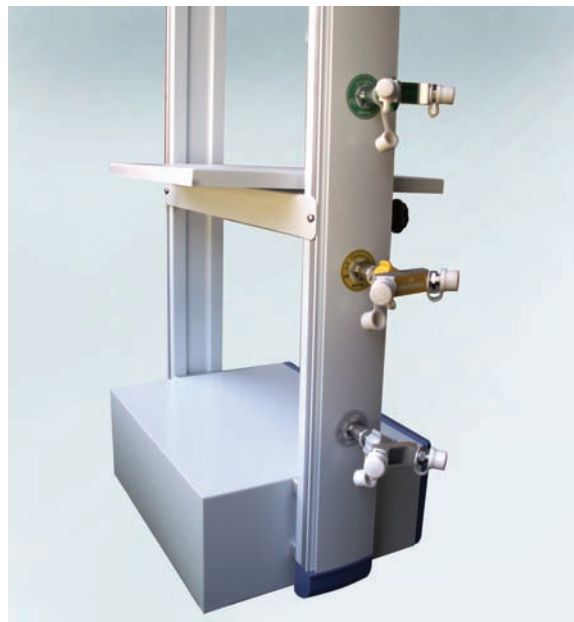

Pontos de gases: corpo confeccionado em latão cromado com rosca padrão para o gás correspondente com pino de impacto, evitando vazamento fora de uso.

As rosca dos pontos de gás são normatizadas de acordo com a ABNT NBR 11906:1992. A identificação dos gases é feita através de etiquetas com cores normatizadas conforme ABNT NBR 12188:2003. Tampão de PVC para proteção das rosca das conexões. Tubulação interna realizada através de mangueiras em poliuretano, devidamente identificadas pela cor conforme normas vigentes.



Tomadas elétricas universal 2P+T, conforme norma ABNT NBR 14136:2002.



Caixa com ponto de gases e tomadas elétricas para acoplar acessórios de gasoterapia como: Fluxômetros, Aspiradores, Umidificadores, Nebulizadores, etc.

Delta 1100



Delta 2100



Delta Ergo



Delta Ergo Plus



Delta Ergo 4100



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
 Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
 Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943

Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br - www.jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
 CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
 Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

