

# Painéis Suspensos JG Moriya

## Linha Delta

**Unidade de trabalho com suportes para monitores e acessórios (com sistema giratório), rede de gases e eletricidade, Hastes de soro e Bombas de Infusão**




## Modelo ERGO PLUS

Os Painéis J. G. Moriya são concebidos e fabricados de acordo com a necessidade e solicitação do cliente, um conceito inovador no mercado nacional e utiliza os mesmos conceitos internacionais de qualidade e tecnologia dos outros equipamentos de nossa linha de fabricação. As caixas podem ser confeccionadas em chapas de aço carbono, alumínio, aço inox ou perfil de alumínio. A disposição e quantidade dos pontos de gases, tomadas elétricas, suportes de soro são definidas pelo cliente; e toda essa vantagem está associada ainda ao cumprimento das normas ABNT.



Os painéis suspensos basicamente têm como função direcionar a alimentação elétrica e de gases próximo aos equipamentos que estarão sendo utilizados dentro da UTI, tais como ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, etc. A forma construtiva do produto permite melhor distribuição destes equipamentos, além de permitir ao usuário mobilidade, ergonomia, facilidade no manuseio e conseqüentemente agilidade nos procedimentos.

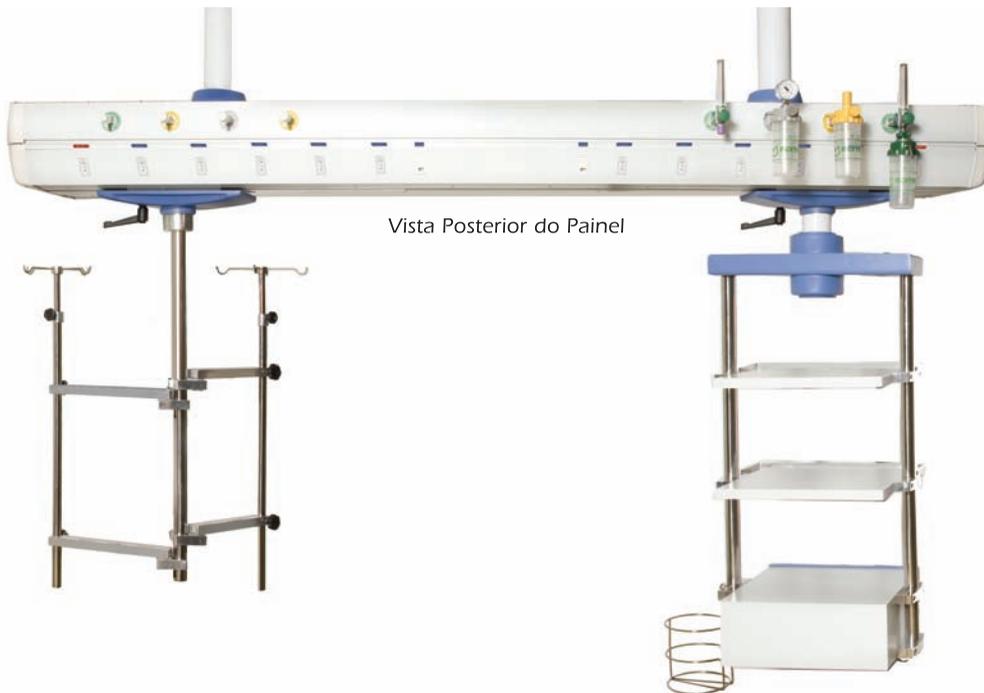

Vista Posterior do Painel

Pontos de gases: corpo confeccionado em latão cromado com rosca padrão para o gás correspondente com pino de impacto, evitando vazamento fora de uso.

As rosca dos pontos de gás são normatizadas de acordo com a ABNT NBR 11906:1992. A identificação dos gases é feita através de etiquetas com cores normatizadas conforme ABNT NBR 12188:2003. Tampão de PVC para proteção das rosca das conexões. Tubulação interna realizada através de mangueiras em poliuretano, devidamente identificadas pela cor conforme normas vigentes. Tomadas elétricas universal 2P+T, norma ABNT NBR 1413:2002 e fios de 2,5mm.



- Sistema de trilhos permitem movimentos laterais (e rotação) tanto das prateleiras quanto do suporte para soro/bomba de infusão.
- Sistema de freios na prateleira e no suporte.
- Prateleiras com ajuste de altura.
- Suporte para frasco coletor de 5 litros em aço inox evitando que produtos caiam no piso.

Tomadas elétricas de 110V e 220V e Postos de Gases na parte posterior para acoplar acessórios de gasoterapia: Fluxômetros, Aspiradores, Umidificadores, Nebulizadores, etc.

Delta 1100



Delta 2100



Delta Ergo



Delta Ergo Plus



Delta Ergo 4100



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.

Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050

Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943

Email: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br) - [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.

Unidade II - Rua da União, 377

CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

