

# ROTAMIX MORIYA

## ROTAMIX AUTOMÁTICO

O **Rotamix Automático** é um equipamento compacto que oferece precisão e facilidade de uso, a regulagem da porcentagem de Óxido nitroso e Oxigênio é ajustado automaticamente por um único botão de controle.

Os equipamentos da **linha Rotamix** são os únicos que oferecem **Blender** e **escala expandida** de 220mm de comprimento, com leitura individual para cada gás (N<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub>), facilitando a leitura e proporcionando maior precisão e segurança na administração dos gases.

- Sistema de Oxigenação em caso de emergência.
- Balão de Silicone de 1, 2 e 3 litros.
- Sistema Antipoluição que mede a vazão e não pressão.
- Máscaras de silicone autoclaváveis com sistema de segurança contra inversão.



O **Rotamix Automático** conta com os principais sistemas de segurança:

### Proteção contra falha na alimentação de O<sub>2</sub>

-Interrompe o fornecimento de N<sub>2</sub>O se a alimentação de O<sub>2</sub> for interrompida ou se a pressão de O<sub>2</sub> for reduzida abaixo de um limite crítico.

### Segurança contra hipóxia

-Garante uma concentração mínima de 30% de O<sub>2</sub> na mistura fornecida ao paciente.

### Válvula antiasfixia

-Permite a entrada de ar na falta de N<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub>.

### Botão de concentração de O<sub>2</sub>

-Leitura direta da concentração com ajuste automático na mistura Óxido Nitroso/Oxigênio.

MÁSCARA NASAL ODONTOLÓGICA




Conjunto portátil de cilindros (Opcional)

# Linha Odontológica J.G. Moriya

Empresa líder no mercado, projeto e fabricação 100% nacional

Assistência técnica com garantia de um ano contra defeitos de fabricação em todo o território brasileiro. Única empresa que oferece um conjunto de sedação consciente completo, com diferentes modalidades de monitorização, kit de emergência, cilindros de aço ou alumínio com gases, balão de silicone e autoclaváveis, máscaras de silicone e autoclaváveis, maleta de emergência, circuito respiratório em silicone e autoclavável, fluxômetro acoplado para emergência, sistema antipoluição que mede a vazão e não a pressão.

## Máscara Odontológica

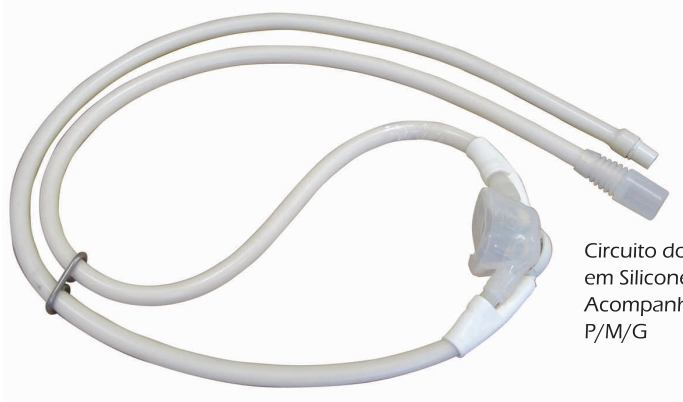

Circuito do paciente em Silicone Autoclavável  
Acompanha 3 máscaras:  
P/M/G



Máscaras em Silicone Autoclavável  
Tamanhos: pequeno, médio e grande

## Reanimadores de silicone autoclaváveis



## Monitor M 3000



Monitor de paciente com ECG e oximetria de pulso e PANI

## Conjuntos portáteis Oximed



Leves, de fácil manuseio, para atendimento de emergência.

## Oxímetros de Pulso

### Modelo portátil



Mod. 1001



Oxímetro de Pulso Para mesa mod. 1000

### Oxímetros de dedo



Mod. 1003



MD300E



MD300C



Oxímetro de dedo Digit



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.  
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050  
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP  
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943  
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.  
Unidade II - Rua da União, 377  
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP  
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302  
www.jgmoriya.com.br